

ClassicStar® NIV Gesichtsmaske

Mehr Tragekomfort durch anatomische Passform und effektive Abdichtung.



Die ClassicStar Gesichtsmaske wurde für die nicht-invasive Beatmungstherapie entworfen. Die Maske deckt den Mund und Nase ab und bietet somit eine effektive Therapie auch im Falle von Mundatmung. Die ClassicStar ist mit Standard-Winkelstück (SE-Version) sowie Anti-Asphyxie-Ventil (AAV-Version) erhältlich.

Die ClassicStar NIV-Gesichtsmaske ist eine Einwegmaske.

Die Dräger Größenschablone hilft bei der Auswahl der richtigen Maskengröße – unnötiges Öffnen von Maskenverpackung wird vermieden.

– Die ClassicStar Gesichtsmaske hat ein luftgefülltes Maskenkissen, das sich individuell an die Gesichtskonturen des Patienten anpassen lässt. Das Maskenkissen kann z. B. mit Hilfe des Pumpballs mit Luft befüllt oder entleert werden. Durch diese Anpassung bietet die Maske einen erhöhten Komfort und effektive Abdichtung.

- Das breite Maskenkissen der ClassicStar NIV-Maske verteilt den Druck über eine größere Oberfläche und hilft dadurch Hautirritationen zu vermeiden.
- Die Stirnstütze mindert den Druck auf den Nasenrücken und kann an die Stirn des Patienten angepasst werden.
- Das 6-Punkt Kopfband bietet eine stabile und sichere Befestigung, die ein Verrutschen der Maske verhindert. Für ein schnelles Entfernen der Maske ist im Kopfband ein Notgurt integriert.
- Optionale Befestigungspunkte am Rahmen des Maskenkörpers ermöglichen die für den Patienten bequemste und sicherste Anbringung des Kopfbandes.
- Das Winkelstück der ClassicStar NIV-Maske kann um 360° gedreht und zusätzlich vertikal bewegt werden (nur SE-Version) und bietet so mehr Flexibilität.




MT-0575-2007

ClassicStar® SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung



D-5546-2010

ClassicStar® AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung

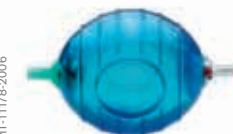


MF-1176-2006

Pumpball mit doppelseitigem Ventil zum Auf- und Abpumpen des Maskenkissens

ClassicStar® SE (mit Standard-Winkelstück)

Das blaue Winkelstück zeigt an, dass die Maske weder ein Anti-Asphyxie-Ventil noch Ausatemöffnungen hat.

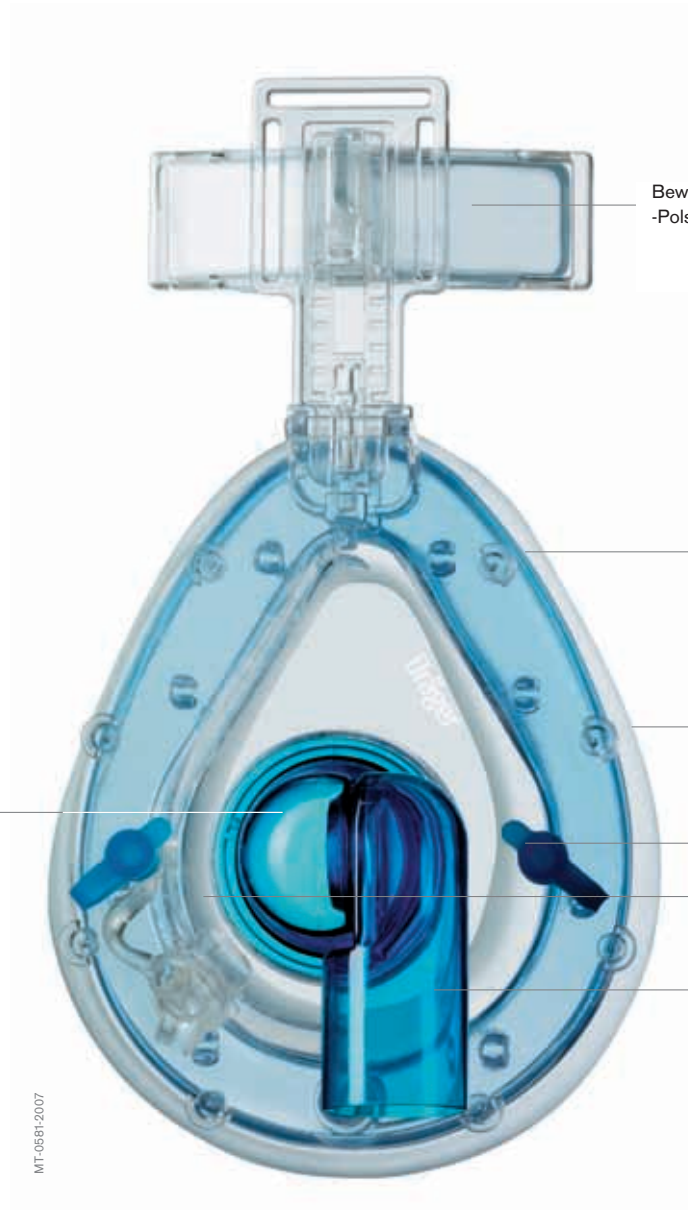

Bewegliche Stirnstütze und -Polsterung für mehr Stabilität

Das Standard-Winkelstück kann um 360° gedreht und vertikal angepasst werden und bietet so mehr Flexibilität.

Druck-/Sauerstoff Öffnung

Durch optionale Befestigungspunkte am Rahmen des Maskenkörpers kann für jeden Patienten die bequemste und sicherste Position zur Anbringung des Kopfbandes gefunden werden.

MT-0581-2007

Individuelle Anpassung (Formbarkeit) der ClassicStar® NIV Gesichtsmaske




D-139-48-2009



D-12161-2009

ClassicStar® AAV (mit Anti-Asphyxie-Ventil)

Das weiße transparente Winkelstück ist mit einem Anti-Asphyxie-Ventil ausgestattet, das bei reduziertem Druck ($< 3 \text{ cm H}_2\text{O}$) einfachen Zugang zur Raumluft sicherstellt. Die Ausatemöffnungen unterstützen die CO_2 Eliminierung während der nicht-invasiven Beatmung.

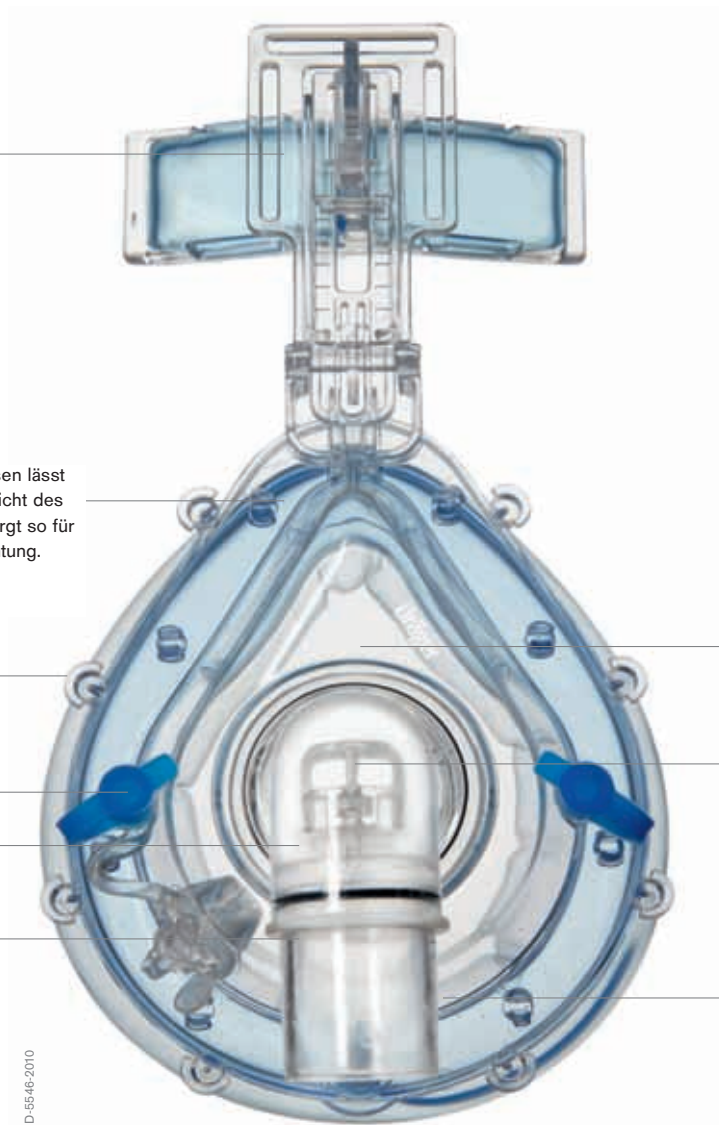

Das luftgefüllte Maskenkissen lässt sich individuell an das Gesicht des Patienten anpassen und sorgt so für idealen Komfort und Abdichtung.

Ausatemöffnungen für CO_2 Eliminierung während der nicht-invasiven Beatmung

Das Anti-Asphyxie-Ventil ermöglicht bei reduziertem Druck den Zugang zur Raumluft

Zugang zum Patienten

Das um 360° drehbare Winkelstück mit Anti-Asphyxie-Ventil sorgt für mehr Flexibilität

D-5546-2010



Die Maske kann durch ein Erhöhen oder Verringern der Luftmenge im Maskenkissen an das Gesicht des Patienten angepasst werden.

D-12119-2009

D-12111-2009

BESTELLINFORMATIONEN

ClassicStar SE	Verpackung	Bestellnummer
ClassicStar SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe S	1 Stück	MP01573
ClassicStar SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe M	1 Stück	MP01574
ClassicStar SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe L	1 Stück	MP01575
ClassicStar AAV		
ClassicStar AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung mit Anti-Asphyxie-Ventil, Größe S	1 Stück	MP01570
ClassicStar AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung mit Anti-Asphyxie-Ventil, Größe M	1 Stück	MP01571
ClassicStar AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung mit Anti-Asphyxie-Ventil, Größe L	1 Stück	MP01572
Zweiseitiger Pumpball zur Luftregulierung	1 Stück	MP01590
Größenschablone für ClassicStar Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung	3 Stück	MP01592

**HAUPTSITZ**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com
* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebfeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Deutschland
Das Qualitätsmanagementsystem
der Dräger Medical GmbH
ist zertifiziert nach den Normen
ISO 13485, ISO 9001 und nach
Anhang II.3 der Richtlinie
93/42/EWG (Medizinprodukte).